

GE検出器のスペクトル の確認の仕方




PCのデスクトップにある**DSP MCA**を起動してください




※ ロングスキャン中は起動しないでください。ロングスキャンが停止します。

DSP MCAを起動すると、下図のようなソフトが起動します。

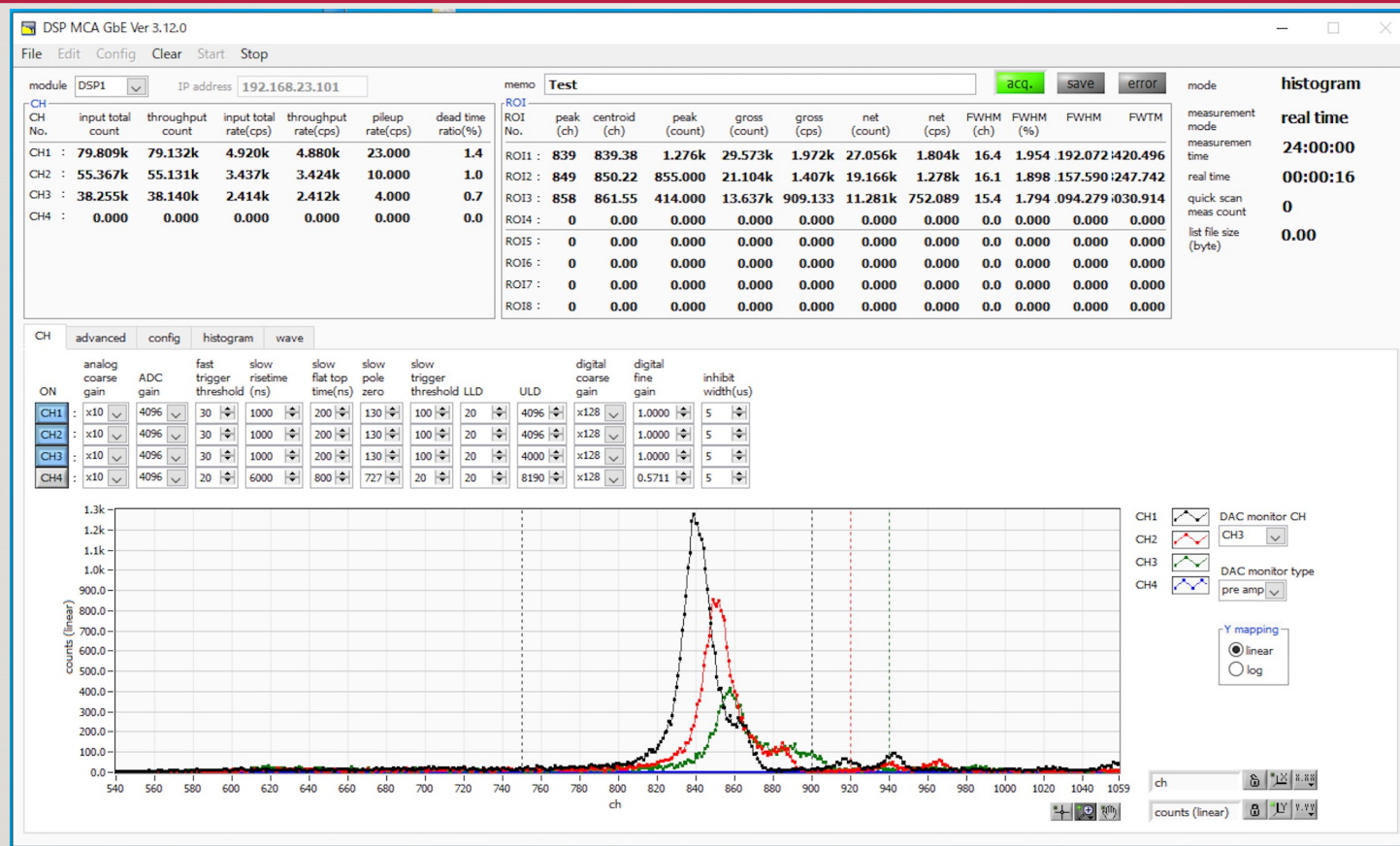

IP ADDRESSが「192.168.23.101」になっていることを確認して**START**をおしてください。

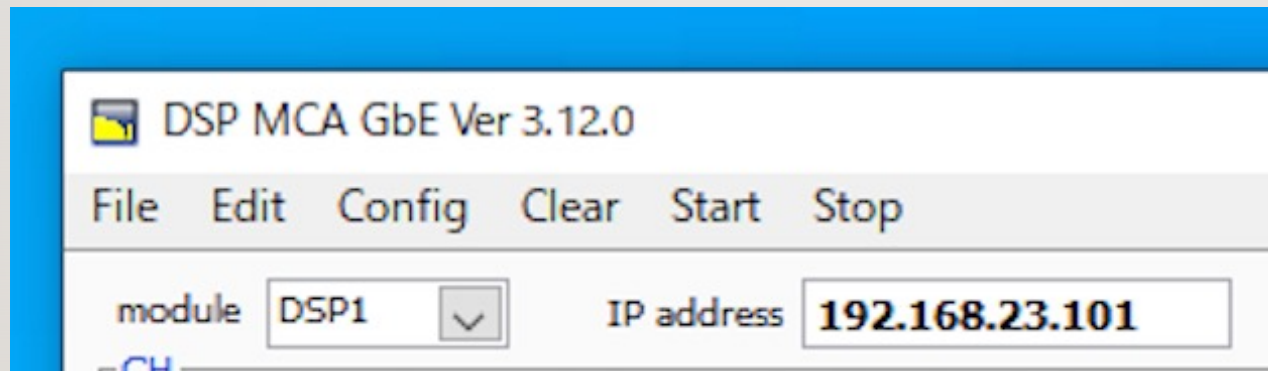

※ 確認が終了したら、**Stop**をおして必ず止めてください。

下のグラフが更新されます。**CH1: DET5**、**CH2: DET6**、**CH3: DET7**となります。点線が設定しているROIとなります。

